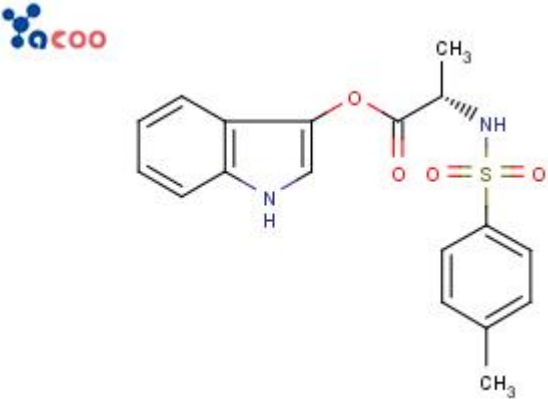


技术规格说明书

品名	3-(N-对甲苯磺酰基-L-丙氨酰氧基)吲哚		
别名	吲哚酯		
CAS 号	75062-54-3	EC 号	278-064-6
分子式	C ₁₈ H ₁₈ N ₂ O ₄ S	分子量	358.412
含量	98.0%	外观	白色至类白色粉末
pH 范围		货号	Y0037
结构式			
描述	本物质属于吲哚酯类，能与白细胞酯酶发生反应，进一步与重氮盐发生偶联反应或氧化反应，形成有色产物，颜色的深浅用于判断白细胞的浓度，该化合物常用于尿常规分析，检测白细胞。		
应用	尿检试剂。		
包装规格	1g/瓶, 10g/瓶, 100g/瓶 可定制包装尺寸		
储存	-20℃		
复验期	2 年		

分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES	技术指标 STANDARD
外观 Appearance	白色至类白色粉末 White to off-white powder
含量 Assay, %	≥98.0